




ERSTE HILFE

bei Herzstillstand mit einem Defibrillator (AED)

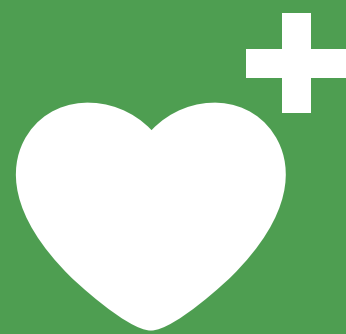

HERZNOTFALL

Eigene Sicherheit beachten!
Informieren Sie weitere Personen.

P = Prüfen Sie auf Lebenszeichen/
ob Atmung vorhanden ist

R = Rufen **NOTRUF 112**

D = Drücken

D = Defibrillieren (Lassen Sie sich
einen Defibrillator bringen.)

Weisen Sie Rettungskräfte ein!

AED-INFORMATIONEN

Standort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____



Defib Deutschland GmbH
Kaiser-Friedrich-Ring 61
40547 Düsseldorf
+49 (0) 211-9753299-0
info@defibdeutschland.de



1 PRÜFEN



1.1 Laut
ansprechen
und anfassen.



1.2 Atmung prüfen
(sehen, hören, fühlen).




Stabile
Seitenlage
herbeiführen.

2 RUFEN



2.1 Notruf absetzen
und Defibrillator
holen lassen.

3 DRÜCKEN

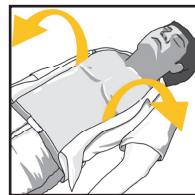

3.1 Oberkörper
freimachen.

3.2 Sofort mit
Kompressionen
beginnen.

5 - 6 CM
TIEF DRÜCKEN
100 - 120 x
PRO MIN.



4 BEATMEN


4.1 2x Beatmen 1 Sek. Luft in Mund oder
Nase zuführen
Kopf dabei überstrecken!
Danach ohne Pause weiter drücken
im Intervall 30 : 2 bis AED eintrifft!



5 DEFIBRILLIEREN



5.1 Zum Ein-
schalten
grüne Taste
drücken.

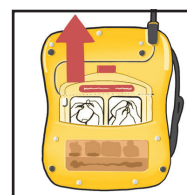

5.2 Elektroden aus
rückseitigem Fach
entnehmen.

5.3 Elektroden
befestigen.



5.4 Nach
Aufforderung
Schocktaste
drücken.



5.5 Kompression und
Beatmung für 2 Minuten
fortführen. Wie in Abb.
③ + ④ dargestellt.